


Maintenance Guide

Lilivis MILL


- Lilivis Mill은 정밀 가공 장비이므로 기본적인 Maintenance가 필요합니다.
- 사용자의 정기적인 관리를 통해 가공물 품질을 유지 할 수 있습니다.
- 사용자의 정기적인 관리를 통해 문제 소지를 미연에 감지하고 예방함으로써 업무 효율을 높일 수 있습니다.
- 유지보수 관리에 필요한 필터, BUR, 장착 TOOL, 클리닝 도구 및 기타 액세서리는 필히 당사가 제공하는 정품을 사용해주시기 바랍니다.

1 스펀들 Warm Up

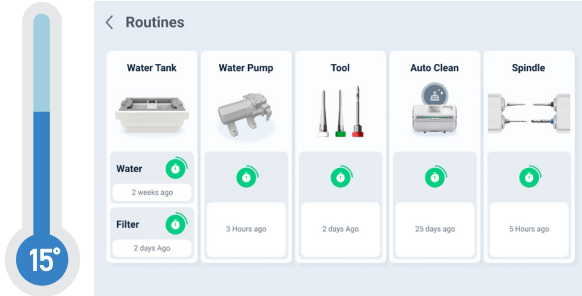


- 매일 장비의 전원을 켜면 warm-up 이 1회 자동으로 진행됩니다.
- 만약 실내의 온도가 15도 이하라면 수동으로 warm-up을 2~3회 추가 진행하시기 바랍니다.

2 Daily관리

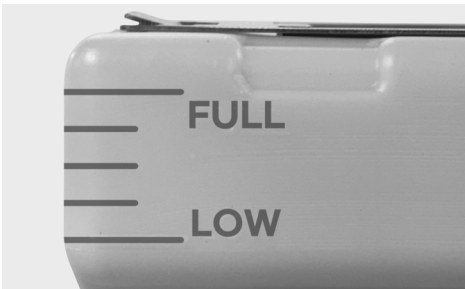

- 워터 탱크의 물 높이가 기준선에 있는지 확인하시기 바랍니다.(FULL부근이 적정 높이)
- 워터 탱크 외부 및 탱크 상단 트레이를 청소해 주세요.
- 필터 상태 확인 후 이물질이 많을 경우 청소(및 교체)를 해주시기 바랍니다.
- 필터 교체 주기를 지켜 주시기 바랍니다.
- 교체 주기가 지나 무리하게 사용하면 가공 도중 멈추거나, 배관을 교체해야 할 수 있습니다.

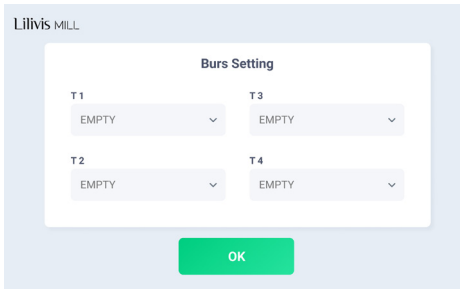


- 장착된 Bur와 설정한 Bur의 종류와 색상이 맞는지 확인하세요.
- 매일 Bur수명 확인과 외관 상태(부러짐, 휘어짐, 체결상태 등)를 점검하세요.
- 수복물 품질에 영향을 끼칠 수 있습니다.



- 바구니 모양의 그물망은 매일 청소해 주세요.
- PMMA블록은 1개 가공시마다 바구니 모양의 그물망을 청소해 주세요.
- 일과 사용이 끝나면 장비 내부 습기를 제거 후 윈도우를 열고 전원을 꺼 주세요.

3 Weekly 관리


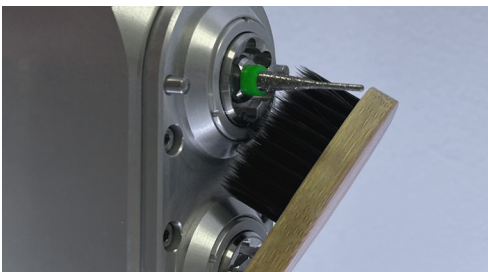


- 장비 사용이 없더라도 최소 1주일에 한번은 장비의 전원을 켜 Warm-Up 을 해주세요.
- 냉각수가 분사되는 노즐은 매주 청소가 필요 합니다.
 - 청소용 솔은 항상 청결도를 유지 시켜 주시기 바랍니다. (정기적으로 교체해주세요)
 - 청소시 장착되어 있는 Bur에 다치지 않도록 조심하시기 바랍니다.
 - 특히 1mm 이하의 Bur에 다치지 않도록 조심하여 주시기 바랍니다.





- 부드러운 천으로 장비의 외부의 먼지 및 이물질을 닦아주세요.
- 바구니 모양의 그물망을 제거 후 내부 배수구를 깨끗하게 청소해 주세요.



4 사용상 주의사항

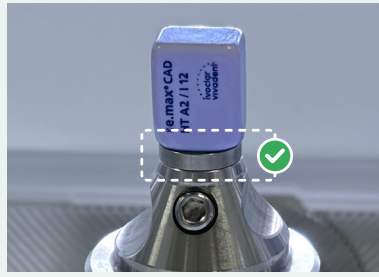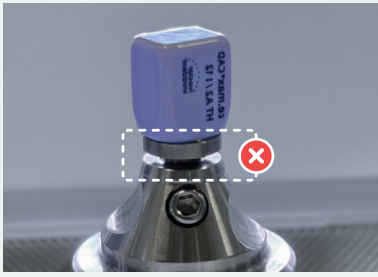

- Block 장착은 홈의 끝 부분까지 넣어서 체결해야 합니다.
- 블록 조임나사는 소모품입니다. 약 500회 이상 사용시 교체하여 주시기 바랍니다.

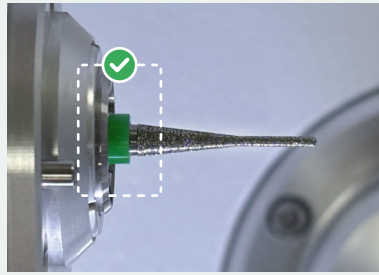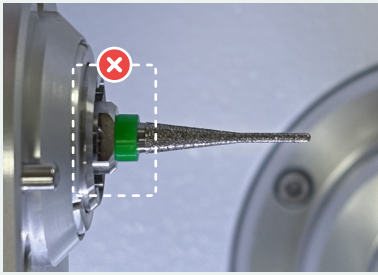

- Bur가 사진과 같이 완전히 삽입되어야 올바른 장착입니다.
- Bur 탈착/장착시 다른 Bur에 손이 다치지 않도록 주의하십시오.

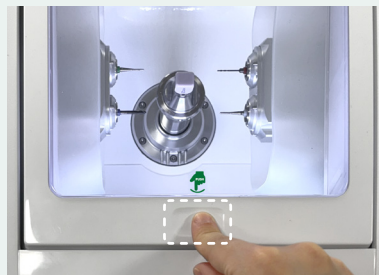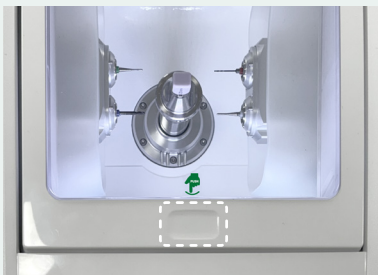


- 윈도우를 닫거나 열을 경우 해당 위치를 가볍게 눌러 열고 닫아 주십시오.


5 워터 탱크 물 보충 방법 및 주의 사항



- 워터 탱크청소는 반드시 필터가 장착된 상태에서 깨끗한 물을 이용하여 수차례 청소하시기 바랍니다.
- 만약 청소 중 필터가 빠지면 해당 필터는 폐기하여 주기 바랍니다.
- 워터 탱크의 표시줄까지 물을 넣어주세요.

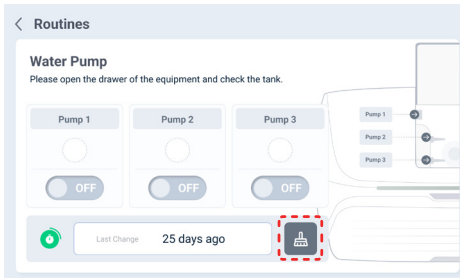

- 물 교체가 완료되면 Pump 기능을 이용하여 물을 수초간 돌려 줍니다.

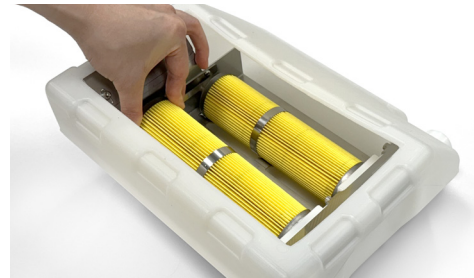

- 새 필터 교체시 필터 장착은 반드시 워터 탱크에 물이 없는 상태로 장착해야 합니다.



- 사용자 매뉴얼
https://3cdn.huvitz.com/lilivis/L-CAM/manual/LM-100_User_Manual_KOR.pdf

Lilivis

Website: <https://lilivis.co.kr/> E-mail : info@ossvis.com